







## INSTRUÇÃO DE USO

### LÂMINAS PARA SERRA CIRÚRGICA

Legenda utilizada na embalagem e rotulagem:

	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Não reutilizar
	Consulte as instruções para o uso
	Validade
	Atenção. Consulte as instruções para o uso
	Produto estéril – esterilizado por irradiação gama

#### **Características e especificações técnicas do produto:**

**Nome técnico:** Lâminas Descartáveis

**Nome comercial:** Lâminas para Serra Cirúrgica

**Matéria prima:** Aço inoxidável endurecido martensítico AISI 420 B / 1.4028 / X 30 Cr 13

**Número ANVISA:** 80517199006

**Produto estéril:** Sim – Irradiação Gama



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

### a. Formas de Apresentação

As Lâminas cirúrgicas - ACF são embaladas unitariamente, sendo a embalagem primária em duplo envelope selado de folha de laminada (PET/folha alumínio/ LDPE 12/9/50 µm) e poliéster transparente com polietileno EVA modificado (PET / PE) (12/50 µm), e a embalagem secundária é em envelope cartonado.

As lâminas são fornecidas estéreis (irradiação gama). Verificar a descrição sobre esterilidade na embalagem das mesmas e ler atentamente sobre o correto uso das lâminas antes do manuseio.

### b. Composição

Aço inoxidável endurecido martensítico AISI 420 B / 1.4028 / X 30 Cr 13

### c. Modelos e Especificações Técnicas

códigos	descritivos	Largura (mm)	Comprimento (mm)	Espessura (mm)
SA 100 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (MA-02)	7,0	20,0	0,80
SA 100 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (MA-02)	9,0	25,0	0,60
SA 100 110 090 089	Lâmina sagital STD 11x90x0,89 mm (MA-02)	11,0	90,0	0,89
SA 100 110 090 119	Lâmina sagital STD 11x90x1,19 mm (MA-02)	11,0	90,0	1,19
SA 100 110 090 127	Lâmina sagital STD 11x90x1,27 mm (MA-02)	11,0	90,0	1,27
SA 100 130 065 090	Lâmina sagital STD 13x65x0,90 mm (MA-02)	13,0	65,0	0,90
SA 100 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (MA-02)	13,0	90,0	0,89
SA 100 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (MA-02)	13,0	90,0	0,90
SA 100 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,00
SA 100 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,19
SA 100 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,20
SA 100 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,27
SA 100 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,30
SA 100 130 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,37
SA 100 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,40
SA 100 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,47
SA 100 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (MA-02)	13,0	90,0	1,50
SA 100 150 030 060	Lâmina sagital micro 15x30x0,60 mm (MA-02)	15,0	30,0	0,60
SA 100 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (MA-02)	19,0	90,0	0,89
SA 100 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (MA-02)	19,0	90,0	0,90
SA 100 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (MA-02)	19,0	90,0	1,00
SA 100 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (MA-02)	19,0	90,0	1,19
SA 100 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm ( MA-02)	19,0	90,0	1,20
SA 100 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm ( MA-02)	19,0	90,0	1,27
SA 100 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm ( MA-02)	19,0	90,0	1,30
SA 100 190 090 135	Lâmina sagital STD 19x90x1,35 mm ( MA-02)	19,0	90,0	1,35
SA 100 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm ( MA-02)	19,0	90,0	1,37
SA 100 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm ( MA-02)	19,0	90,0	1,40
SA 100 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm ( MA-02)	19,0	90,0	1,47
SA 100 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm ( MA-02)	19,0	90,0	1,50
SA 100 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (MA-02)	19,0	100,0	0,89
SA 100 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (MA-02)	19,0	100,0	0,90
SA 100 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (MA-02)	19,0	100,0	1,00
SA 100 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (MA-02)	19,0	100,0	1,19

SA 100 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (MA-02)	19,0	100,0	1,20
SA 100 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (MA-02)	19,0	100,0	1,27
SA 100 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (MA-02)	19,0	100,0	1,30
SA 100 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (MA-02)	19,0	100,0	1,37
SA 100 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (MA-02)	19,0	100,0	1,40
SA 100 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (MA-02)	19,0	100,0	1,47
SA 100 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm(MA-02)	19,0	100,0	1,50
SA 100 195 062 090	Lâmina sagital micro 19,5x62x0,90 mm (MA-02)	19,5	62,0	0,90
SA 100 195 063 060	Lâmina sagital micro 19,5x63x0,60 mm (MA-02)	19,5	63,0	0,60
SA 100 195 070 090	Lâmina sagital micro 19,5x70x0,90 mm (MA-02)	19,5	70,0	0,90
SA 100 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (MA-02)	19,5	90,0	0,89
SA 100 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (MA-02)	19,5	90,0	0,90
SA 100 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,00
SA 100 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,19
SA 100 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,20
SA 100 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,27
SA 100 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,30
SA 100 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,37
SA 100 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,40
SA 100 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,47
SA 100 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (MA-02)	19,5	90,0	1,50
SA 100 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (MA-02)	22,0	90,0	0,89
SA 100 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (MA-02)	22,0	90,0	0,90
SA 100 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,00
SA 100 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,19
SA 100 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,20
SA 100 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,27
SA 100 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,30
SA 100 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,37
SA 100 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,40
SA 100 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,47
SA 100 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (MA-02)	22,0	90,0	1,50
SA 100 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (MA-02)	25,0	90,0	0,89
SA 100 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (MA-02)	25,0	90,0	0,90
SA 100 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,00
SA 100 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,19
SA 100 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,20
SA 100 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,27
SA 100 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,30
SA 100 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,37
SA 100 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,40
SA 100 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,47
SA 100 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (MA-02)	25,0	90,0	1,50
SA 100 254 100 089	Lâmina sagital STD 25,4x100x0,89 mm (MA-02)	25,4	100,0	0,89
SA 100 254 100 090	Lâmina sagital STD 25,4x100x0,90 mm (MA-02)	25,4	100,0	0,90
SA 100 254 100 100	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,00 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,00
SA 100 254 100 119	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,19 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,19
SA 100 254 100 120	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,20 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,20
SA 100 254 100 127	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,27 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,27
SA 100 254 100 130	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,30 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,30

SA 100 254 100 137	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,37 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,37
SA 100 254 100 140	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,40 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,40
SA 100 254 100 147	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,47 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,47
SA 100 254 100 150	Lâmina sagital STD 25,4x100x1,50 mm (MA-02)	25,4	100,0	1,50
SA 100 300 050 090	Lâmina sagital micro 30x50x0,90 mm (MA-02)	30,0	50,0	0,90
SA 100 300 050 100	Lâmina sagital micro 30x50x1,00 mm (MA-02)	30,0	50,0	1,00
SA 100 320 064 090	Lâmina sagital micro 32x64x0,90 mm (MA-02)	32,0	64,0	0,90
SA 100 320 067 090	Lâmina sagital micro 32x67x0,90 mm (MA-02)	32,0	67,0	0,90
SA 100 480 064 090	Lâmina sagital micro 48x64x0,90 mm (MA-02)	48,0	64,0	0,90
SA 100 090 055 060	Lâmina recíprocante 09x55x0,60 mm (MA-03)	9,0	55,0	0,60
SA 100 090 055 090	Lâmina recíprocante 09x55x0,90 mm (MA-03)	9,0	55,0	0,90
SA 100 090 080 060	Lâmina recíprocante 9x80x0,60 mm (MA-03)	9,0	80,0	0,60
SA 100 120 070 060	Lâmina recíprocante 12x70x0,60 mm (MA-03)	12,0	70,0	0,60
SA 100 120 070 090	Lâmina recíprocante 12x70x0,90 mm (MA-03)	12,0	70,0	0,90
SA 100 120 070 100	Lâmina recíprocante 12x70x1,00 mm (MA-03)	12,0	70,0	1,00
SA 100 120 070 120	Lâmina recíprocante 12x70x1,20 mm (MA-03)	12,0	70,0	1,20
SA 100 120 076 060	Lâmina recíprocante 12x76x0,60 mm (MA-03)	12,0	76,0	0,60
SA 100 120 076 090	Lâmina recíprocante 12x76x0,90 mm (MA-03)	12,0	76,0	0,90
SA 100 120 076 100	Lâmina recíprocante 12x76x1,00 mm (MA-03)	12,0	76,0	1,00
SA 100 120 076 120	Lâmina recíprocante 12x76x1,20 mm (MA-03)	12,0	76,0	1,20
SA 100 120 090 060	Lâmina recíprocante 12x90x0,60 mm (MA-03)	12,0	90,0	0,60
SA 100 120 090 090	Lâmina recíprocante 12x90x0,90 mm (MA-03)	12,0	90,0	0,90
SA 100 040 006 060	Lâmina sagital micro 4x6x0,60 mm (MA-01)	4,0	6,0	0,60
SA 100 045 026 060	Lâmina sagital micro 4,5x26x0,60 mm (MA-01)	4,5	26,0	0,60
SA 100 055 018 060	Lâmina sagital micro 5,5x18x0,60 mm (MA-01)	5,5	18,0	0,60
SA 100 055 026 060	Lâmina sagital micro 5,5x26x0,60 mm (MA-01)	5,5	26,0	0,60
SA 100 060 033 060	Lâmina sagital micro 06x33x0,60 mm (MA-01)	6,0	33,0	0,60
SA 100 095 025 060	Lâmina sagital micro 9,5x25x0,60mm (MA-01)	9,5	25,0	0,60
SA 100 100 018 060	Lâmina sagital micro 10x18x0,60 mm (MA-01)	10,0	18,0	0,60
SA 100 100 030 060	Lâmina sagital micro 10x30x0,60 mm (MA-01)	10,0	30,0	0,60
SA 100 100 032 060	Lâmina sagital micro 10x32x0,60 mm (MA-01)	10,0	32,0	0,60
SA 100 100 033 060	Lâmina sagital micro 10x33x0,60 mm (MA-01)	10,0	33,0	0,60
SA 100 150 040 060	Lâmina sagital micro 15x40x0,60 mm (MA-01)	15,0	40,0	0,60
SA 120 025 018 060	Lâmina sagital micro 2,5x18x0,60 mm (SK-05)	2,5	18,0	0,60
SA 120 050 012 060	Lâmina sagital micro 5x12x0,60 mm (SK-05)	5,0	12,0	0,60
SA 120 050 018 060	Lâmina sagital micro 5x18x0,60 mm (SK-05)	5,0	18,0	0,60
SA 120 050 025 060	Lâmina sagital micro 5x25x0,60 mm (SK-05)	5,0	25,0	0,60
SA 120 060 032 060	Lâmina recíprocante 06x32x0,60 mm (SK-06)	6,0	32,0	0,60
SA 120 060 060 060	Lâmina recíprocante 06x60x0,60 mm (SK-06)	6,0	60,0	0,60
SA 120 070 018 060	Lâmina sagital micro 7x18x0,60 mm (SK-05)	7,0	18,0	0,60
SA 120 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (SK-01)	7,0	20,0	0,80
SA 120 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (SK-05)	7,0	25,0	0,60
SA 120 080 025 060	Lâmina sagital micro 8x25x0,60 mm (SK-05)	8,0	25,0	0,60
SA 120 080 035 060	Lâmina sagital micro 08x35x0,60 mm (SK-05)	8,0	35,0	0,60
SA 120 090 012 060	Lâmina sagital micro 9x12x0,60 mm (SK-05)	9,0	12,0	0,60
SA 120 090 018 060	Lâmina sagital micro 9x18x0,60 mm (SK-05)	9,0	18,0	0,60
SA 120 090 024 060	Lâmina sagital micro 9x24x0,60 mm (SK-05)	9,0	24,0	0,60
SA 120 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (SK-01)	9,0	25,0	0,60
SA 120 090 020 090	Lâmina sagital micro 9x20x0,90 mm (SK-01)	9,0	20,0	0,90
SA 120 090 030 060	Lâmina sagital micro 9x30x0,60 mm (SK-05)	9,0	30,0	0,60



SA 120 090 035 060	Lâmina sagital micro 9x35x0,60 mm (SK-01)	9,0	35,0	0,60
SA 120 100 025 060	Lâmina sagital micro 10x25x0,60 mm (SK-05)	10,0	25,0	0,60
SA 120 100 035 060	Lâmina sagital micro 10x35x0,60 mm (SK-05)	10,0	35,0	0,60
SA 120 105 072 060	Lâmina recíprocante 10,5x72x0,60 mm (SK-06)	10,5	72,0	0,60
SA 120 105 072 090	Lâmina recíprocante 10,5x72x0,90 mm (SK-06)	10,5	72,0	0,90
SA 120 105 072 100	Lâmina recíprocante 10,5x72x1,00 mm (SK-06)	10,5	72,0	1,00
SA 120 105 072 120	Lâmina recíprocante 10,5x72x1,20 mm (SK-06)	10,5	72,0	1,20
SA 120 105 077 060	Lâmina recíprocante 10,5x77x0,60 mm (SK-06)	10,5	77,0	0,60
SA 120 105 077 090	Lâmina recíprocante 10,5x77x0,90 mm (SK-06)	10,5	77,0	0,90
SA 120 105 077 100	Lâmina recíprocante 10,5x77x1,00 mm (SK-06)	10,5	77,0	1,00
SA 120 105 077 120	Lâmina recíprocante 10,5x77x1,20 mm (SK-06)	10,5	77,0	1,20
SA 120 125 068 090	Lâmina recíprocante 12,5x68x0,90 mm (SK-06)	12,5	68,0	0,90
SA 120 125 068 100	Lâmina recíprocante 12,5x68x1,00 mm (SK-06)	12,5	68,0	1,00
SA 120 125 068 120	Lâmina recíprocante 12,5x68x1,20 mm (SK-06)	12,5	68,0	1,20
SA 120 130 035 060	Lâmina sagital micro 13x35x0,60 mm (SK-05)	13,0	35,0	0,60
SA 120 130 040 060	Lâmina sagital micro 13x40x0,60 mm (SK-05)	13,0	40,0	0,60
SA 120 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (SK-01)	13,0	70,0	0,90
SA 120 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (SK-01)	13,0	70,0	1,00
SA 120 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (SK-01)	13,0	70,0	1,20
SA 120 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (SK-01)	13,0	70,0	1,30
SA 120 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (SK-01)	13,0	70,0	1,40
SA 120 130 070 150	Lâmina sagital STD 13x70x1,50 mm (SK-01)	13,0	70,0	1,50
SA 120 130 085 089	Lâmina sagital STD 13x85x0,89 mm (SK-01)	13,0	85,0	0,89
SA 120 130 085 090	Lâmina sagital STD 13x85x0,90 mm (SK-01)	13,0	85,0	0,90
SA 120 130 085 100	Lâmina sagital STD 13x85x1,00 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,00
SA 120 130 085 119	Lâmina sagital STD 13x85x1,19 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,19
SA 120 130 085 120	Lâmina sagital STD 13x85x1,20 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,20
SA 120 130 085 127	Lâmina sagital STD 13x85x1,27 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,27
SA 120 130 085 130	Lâmina sagital STD 13x85x1,3 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,30
SA 120 130 085 137	Lâmina sagital STD 13x85x1,37 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,37
SA 120 130 085 140	Lâmina sagital STD 13x85x1,40 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,40
SA 120 130 085 147	Lâmina sagital STD 13x85x1,47 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,47
SA 120 130 085 150	Lâmina sagital STD 13x85x1,50 mm (SK-01)	13,0	85,0	1,50
SA 120 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (SK-01)	13,0	90,0	0,89
SA 120 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (SK-01)	13,0	90,0	0,90
SA 120 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,00
SA 120 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,19
SA 120 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,20
SA 120 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,27
SA 120 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,30
SA 120 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,37
SA 120 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,40
SA 120 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,47
SA 120 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (SK-01)	13,0	90,0	1,50
SA 120 135 068 090	Lâmina recíprocante 13,5x68x0,90 mm (SK-06)	13,5	68,0	0,90
SA 120 135 068 100	Lâmina recíprocante 13,5x68x1,00 mm (SK-06)	13,5	68,0	1,00
SA 120 135 068 120	Lâmina recíprocante 13,5x68x1,20 mm (SK-06)	13,5	68,0	1,20
SA 120 150 035 060	Lâmina sagital micro 15x35x0,60 mm (SK-01)	15,0	35,0	0,60
SA 120 150 035 100	Lâmina sagital micro 15x35x1,00 mm (SK-01)	15,0	35,0	1,00
SA 120 150 045 100	Lâmina sagital micro 15x45x1,00 mm (SK-01)	15,0	45,0	1,00



SA 120 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (SK-01)	19,0	70,0	0,90
SA 120 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (SK-01)	19,0	70,0	1,00
SA 120 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (SK-01)	19,0	70,0	1,20
SA 120 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (SK-01)	19,0	70,0	1,30
SA 120 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (SK-01)	19,0	70,0	1,40
SA 120 190 070 150	Lâmina sagital STD 19x70x1,50 mm (SK-01)	19,0	70,0	1,50
SA 120 190 085 089	Lâmina sagital STD 19x85x0,89 mm (SK-01)	19,0	85,0	0,89
SA 120 190 085 090	Lâmina sagital STD 19x85x0,90 mm (SK-01)	19,0	85,0	0,90
SA 120 190 085 100	Lâmina sagital STD 19x85x1,00 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,00
SA 120 190 085 119	Lâmina sagital STD 19x85x1,19 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,19
SA 120 190 085 120	Lâmina sagital STD 19x85x1,20 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,20
SA 120 190 085 127	Lâmina sagital STD 19x85x1,27 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,27
SA 120 190 085 130	Lâmina sagital STD 19x85x1,30 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,30
SA 120 190 085 137	Lâmina sagital STD 19x85x1,37 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,37
SA 120 190 085 140	Lâmina sagital STD 19x85x1,40 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,40
SA 120 190 085 147	Lâmina sagital STD 19x85x1,47 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,47
SA 120 190 085 150	Lâmina sagital STD 19x85x1,50 mm (SK-01)	19,0	85,0	1,50
SA 120 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (SK-01)	19,0	90,0	0,89
SA 120 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (SK-01)	19,0	90,0	0,90
SA 120 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,00
SA 120 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,19
SA 120 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,20
SA 120 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,27
SA 120 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,30
SA 120 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,37
SA 120 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,40
SA 120 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,47
SA 120 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (SK-01)	19,0	90,0	1,50
SA 120 190 095 100	Lâmina sagital STD 19x95x1,00 mm (SK-01)	19,0	95,0	1,00
SA 120 190 095 120	Lâmina sagital STD 19x95x1,20 mm (SK-01)	19,0	95,0	1,20
SA 120 190 095 127	Lâmina sagital STD 19x95x1,27 mm (SK-01)	19,0	95,0	1,27
SA 120 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (SK-01)	19,0	100,0	0,89
SA 120 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (SK-01)	19,0	100,0	0,90
SA 120 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,00
SA 120 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,19
SA 120 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,20
SA 120 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,27
SA 120 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,30
SA 120 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,37
SA 120 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,40
SA 120 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,47
SA 120 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (SK-01)	19,0	100,0	1,50
SA 120 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (SK-01)	19,5	90,0	0,89
SA 120 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (SK-01)	19,5	90,0	0,90
SA 120 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,00
SA 120 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,19
SA 120 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,20
SA 120 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,27
SA 120 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,30
SA 120 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,37





SA 120 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,40
SA 120 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,47
SA 120 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (SK-01)	19,5	90,0	1,50
SA 120 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (SK-01)	22,0	90,0	0,89
SA 120 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (SK-01)	22,0	90,0	0,90
SA 120 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,00
SA 120 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,19
SA 120 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,20
SA 120 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,27
SA 120 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,30
SA 120 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,37
SA 120 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,40
SA 120 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,47
SA 120 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (SK-01)	22,0	90,0	1,50
SA 120 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (SK-01)	25,0	70,0	0,90
SA 120 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (SK-01)	25,0	70,0	1,00
SA 120 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (SK-01)	25,0	70,0	1,20
SA 120 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (SK-01)	25,0	70,0	1,30
SA 120 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (SK-01)	25,0	70,0	1,40
SA 120 250 070 150	Lâmina sagital STD 25x70x1,50 mm (SK-01)	25,0	70,0	1,50
SA 120 250 085 089	Lâmina sagital STD 25x85x0,89 mm (SK-01)	25,0	85,0	0,89
SA 120 250 085 090	Lâmina sagital STD 25x85x0,90 mm (SK-01)	25,0	85,0	0,90
SA 120 250 085 100	Lâmina sagital STD 25x85x1,00 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,00
SA 120 250 085 119	Lâmina sagital STD 25x85x1,19 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,19
SA 120 250 085 120	Lâmina sagital STD 25x85x1,20 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,20
SA 120 250 085 127	Lâmina sagital STD 25x85x1,27 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,27
SA 120 250 085 130	Lâmina sagital STD 25x85x1,30 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,30
SA 120 250 085 137	Lâmina sagital STD 25x85x1,37 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,37
SA 120 250 085 140	Lâmina sagital STD 25x85x1,40 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,40
SA 120 250 085 147	Lâmina sagital STD 25x85x1,47 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,47
SA 120 250 085 150	Lâmina sagital STD 25x85x1,50 mm (SK-01)	25,0	85,0	1,50
SA 120 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (SK-01)	25,0	90,0	0,89
SA 120 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (SK-01)	25,0	90,0	0,90
SA 120 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,00
SA 120 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,19
SA 120 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,20
SA 120 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,27
SA 120 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,30
SA 120 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,37
SA 120 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,40
SA 120 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,47
SA 120 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (SK-01)	25,0	90,0	1,50
SA 120 250 095 100	Lâmina sagital STD 25x95x1,00 mm (SK-01)	25,0	95,0	1,00
SA 120 250 095 120	Lâmina sagital STD 25x95x1,20 mm (SK-01)	25,0	95,0	1,20
SA 120 250 095 127	Lâmina sagital STD 25x95x1,27 mm (SK-01)	25,0	95,0	1,27
SA 120 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (SK-01)	25,4	90,0	0,89
SA 120 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (SK-01)	25,4	90,0	0,90
SA 120 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,00
SA 120 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,19
SA 120 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,20

SA 120 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,27
SA 120 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,30
SA 120 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,37
SA 120 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,40
SA 120 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,47
SA 120 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (SK-01)	25,4	90,0	1,50
SA 120 270 058 060	Lâmina sagital 27x58x0,60 mm (SK-01)	27,0	58,0	0,60
SA 120 300 032 060	Lâmina sagital 30x32x0,60 mm (SK-01)	30,0	32,0	0,60
SA 120 405 475 060	Lâmina sagital 40,5x47,5x0,60 mm (SK-01)	40,5	47,5	0,60
SA 120 530 032 060	Lâmina sagital 53x32x0,60 mm (SK-01)	53,0	32,0	0,60
SA 120 600 030 120	Lâmina sagital 60x30x1,20 mm (SK-01)	60,0	30,0	1,20
SA 120 800 025 060	Lâmina sagital 80x25x0,60 mm (SK-01)	80,0	25,0	0,60
SA 140 055 025 060	Lâmina sagital micro 5,5x25x0,60 mm (LH-01)	5,5	25,0	0,60
SA 140 095 025 060	Lâmina sagital micro 9,5x25x0,60 mm (LH-01)	9,5	25,0	0,60
SA 140 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (LH-01)	7,0	25,0	0,60
SA 140 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (LH-01)	9,0	25,0	0,60
SA 140 090 035 060	Lâmina sagital micro 90° 9x35x0,60 mm(LH-01)	9,0	35,0	0,60
SA 140 090 040 060	Lâmina sagital micro 9x40x0,60 mm (LH-01)	9,0	40,0	0,60
SA 140 130 064 090	Lâmina sagital micro 13x64x0,90 mm (LH-01)	13,0	64,0	0,90
SA 140 130 070 090	Lâmina sagital STD 13x70x0,90 mm (LH-01)	13,0	70,0	0,90
SA 140 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (LH-01)	13,0	70,0	1,00
SA 140 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (LH-01)	13,0	70,0	1,20
SA 140 130 070 130	Lâmina sagital STD 13x70x1,30 mm (LH-01)	13,0	70,0	1,30
SA 140 130 070 140	Lâmina sagital STD 13x70x1,40 mm (LH-01)	13,0	70,0	1,40
SA 140 190 064 090	Lâmina sagital STD 19x64x0,90 mm (LH-01)	19,0	64,0	0,90
SA 140 190 070 090	Lâmina sagital STD 19x70x0,90 mm (LH-01)	19,0	70,0	0,90
SA 140 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (LH-01)	19,0	70,0	1,00
SA 140 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (LH-01)	19,0	70,0	1,20
SA 140 190 070 130	Lâmina sagital STD 19x70x1,30 mm (LH-01)	19,0	70,0	1,30
SA 140 190 070 140	Lâmina sagital STD 19x70x1,40 mm (LH-01)	19,0	70,0	1,40
SA 140 250 070 090	Lâmina sagital STD 25x70x0,90 mm (LH-01)	25,0	70,0	0,90
SA 140 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (LH-01)	25,0	70,0	1,00
SA 140 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (LH-01)	25,0	70,0	1,20
SA 140 250 070 130	Lâmina sagital STD 25x70x1,30 mm (LH-01)	25,0	70,0	1,30
SA 140 250 070 140	Lâmina sagital STD 25x70x1,40 mm (LH-01)	25,0	70,0	1,40
SA 140 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (LH-01)	13,0	90,0	0,89
SA 140 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (LH-01)	13,0	90,0	0,90
SA 140 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,00
SA 140 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,19
SA 140 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,20
SA 140 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,27
SA 140 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,30
SA 140 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,37
SA 140 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,40
SA 140 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,47
SA 140 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (LH-01)	13,0	90,0	1,50
SA 140 150 048 060	Lâmina sagital micro 15x48x0,60 mm (LH-01)	15,0	48,0	0,60
SA 140 190 090 089	Lâmina sagital micro 19x90x0,89 mm (LH-01)	19,0	90,0	0,89
SA 140 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (LH-01)	19,0	90,0	0,90
SA 140 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,00





SA 140 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,19
SA 140 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,20
SA 140 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,27
SA 140 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,30
SA 140 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,37
SA 140 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,40
SA 140 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,47
SA 140 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (LH-01)	19,0	90,0	1,50
SA 140 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (LH-01)	19,0	100,0	0,89
SA 140 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (LH-01)	19,0	100,0	0,90
SA 140 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,00
SA 140 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,19
SA 140 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,20
SA 140 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,27
SA 140 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,30
SA 140 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,37
SA 140 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,40
SA 140 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,47
SA 140 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (LH-01)	19,0	100,0	1,50
SA 140 195 040 060	Lâmina sagital micro 19,5x40x0,60 mm (LH-01)	19,5	40,0	0,60
SA 140 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (LH-01)	19,5	90,0	0,89
SA 140 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (LH-01)	19,5	90,0	0,90
SA 140 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,00
SA 140 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,19
SA 140 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,20
SA 140 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,27
SA 140 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,30
SA 140 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,37
SA 140 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,40
SA 140 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,47
SA 140 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (LH-01)	19,5	90,0	1,50
SA 140 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (LH-01)	22,0	90,0	0,89
SA 140 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (LH-01)	22,0	90,0	0,90
SA 140 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,00
SA 140 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,19
SA 140 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,20
SA 140 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,27
SA 140 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,30
SA 140 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,37
SA 140 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,40
SA 140 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,47
SA 140 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (LH-01)	22,0	90,0	1,50
SA 140 250 064 090	Lâmina sagital micro 25x64x0,90 mm (LH-01)	25,0	64,0	0,90
SA 140 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (LH-01)	25,0	90,0	0,89
SA 140 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (LH-01)	25,0	90,0	0,90
SA 140 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,00
SA 140 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,19
SA 140 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,20
SA 140 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,27
SA 140 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,30



SA 140 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,37
SA 140 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,40
SA 140 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,47
SA 140 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (LH-01)	25,0	90,0	1,50
SA 140 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (LH-01)	25,4	90,0	0,89
SA 140 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (LH-01)	25,4	90,0	0,90
SA 140 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,00
SA 140 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,19
SA 140 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,20
SA 140 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,27
SA 140 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,30
SA 140 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,37
SA 140 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,40
SA 140 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,47
SA 140 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (LH-01)	25,4	90,0	1,50
SA 140 280 048 060	Lâmina sagital micro 28x48x0,60 mm (LH-01)	28,0	48,0	0,60
SA 140 320 030 090	Lâmina sagital micro 32x30x0,90 mm (LH-01)	32,0	30,0	0,90
SA 140 320 064 090	Lâmina sagital micro 32x64x0,90 mm (LH-01)	32,0	64,0	0,90
SA 140 330 064 090	Lâmina sagital micro 33x64x0,90 mm (LH-01)	33,0	64,0	0,90
SA 140 520 030 090	Lâmina sagital 52x30x0,90 mm (LH-01)	52,0	30,0	0,90
SA 140 520 040 090	Lâmina sagital 52x40x0,90 mm (LH-01)	52,0	40,0	0,90
SA 141 090 025 060	Lâmina sagital 9x25x0,60 mm (LH-01)	9,0	25,0	0,60
SA 180 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (BJ-01)	7,0	20,0	0,80
SA 180 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (BJ-01)	7,0	25,0	0,60
SA 180 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (BJ-01)	9,0	25,0	0,60
SA 180 110 090 100	Lâmina sagital STD 11x90x1,00 mm (BJ-01)	11,0	90,0	1,00
SA 180 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (BJ-01)	13,0	90,0	0,90
SA 180 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (BJ-01)	13,0	90,0	1,00
SA 180 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (BJ-01)	13,0	90,0	1,20
SA 180 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (BJ-01)	13,0	90,0	1,27
SA 180 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (BJ-01)	13,0	90,0	1,30
SA 180 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (BJ-01)	19,0	90,0	0,90
SA 180 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (BJ-01)	19,0	90,0	1,00
SA 180 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (BJ-01)	19,0	90,0	1,20
SA 180 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (BJ-01)	19,0	90,0	1,27
SA 180 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (BJ-01)	19,0	90,0	1,30
SA 180 220 070 100	Lâmina sagital STD 22x70x1,00 mm (BJ-01)	22,0	70,0	1,00
SA 180 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (BJ-01)	22,0	90,0	1,00
SA 180 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (BJ-01)	25,0	90,0	0,90
SA 180 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (BJ-01)	25,0	90,0	1,00
SA 180 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (BJ-01)	25,0	90,0	1,20
SA 180 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (BJ-01)	25,0	90,0	1,27
SA 180 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (BJ-01)	25,0	90,0	1,30
SA 180 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (BJ-01)	19,0	100,0	1,00
SA 180 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (BJ-01)	19,0	100,0	1,20
SA 180 090 080 060	Lâmina recíprocante 9x80x0,60 mm (BJ-02)	9,0	80,0	0,60
SA 180 090 080 090	Lâmina recíprocante 9x80x0,90 mm (BJ-02)	9,0	80,0	0,90
SA 300 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (ST-08)	7,0	20,0	0,80
SA 300 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (ST-08)	9,0	25,0	0,60
SA 300 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (ST-08)	13,0	90,0	0,90



SA 300 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (ST-08)	13,0	90,0	1,00
SA 300 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (ST-08)	13,0	90,0	1,20
SA 300 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (ST-08)	13,0	90,0	1,30
SA 300 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (ST-08)	13,0	90,0	1,40
SA 300 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (ST-08)	13,0	90,0	1,50
SA 300 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (ST-08)	19,0	90,0	0,90
SA 300 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (ST-08)	19,0	90,0	1,00
SA 300 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (ST-08)	19,0	90,0	1,20
SA 300 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (ST-08)	19,0	90,0	1,27
SA 300 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (ST-08)	19,0	90,0	1,30
SA 300 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (ST-08)	19,0	90,0	1,40
SA 300 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (ST-08)	19,0	90,0	1,50
SA 300 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (ST-08)	25,0	90,0	0,90
SA 300 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (ST-08)	25,0	90,0	1,00
SA 300 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (ST-08)	25,0	90,0	1,20
SA 300 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (ST-08)	25,0	90,0	1,30
SA 300 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (ST-08)	25,0	90,0	1,40
SA 300 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (ST-08)	25,0	90,0	1,50
SA 200 055 019 060	Lâmina sagital micro 5,5x19x0,60 mm (DS-02)	5,5	19,0	0,60
SA 200 055 023 060	Lâmina sagital micro 5,5x23x0,60 mm (DS-02)	5,5	23,0	0,60
SA 200 055 026 060	Lâmina sagital micro 5,5x26x0,60 mm (DS-02)	5,5	26,0	0,60
SA 200 055 034 060	Lâmina sagital micro 5,5x34x0,60 mm (DS-02)	5,5	34,0	0,60
SA 200 060 030 060	Lâmina sagital micro 06x30x0,60 mm (DS-02)	6,0	30,0	0,60
SA 200 070 016 060	Lâmina sagital micro 7x16x0,60 mm (DS-02)	7,0	16,0	0,60
SA 200 070 020 060	Lâmina sagital micro 7x20x0,60 mm (DS-02)	7,0	20,0	0,60
SA 200 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (DS-01)	7,0	20,0	0,80
SA 200 070 022 060	Lâmina sagital micro 7x22x0,60 mm (DS-02)	7,0	22,0	0,60
SA 200 070 031 060	Lâmina sagital micro 7x31x0,60 mm (DS-02)	7,0	31,0	0,60
SA 200 080 030 060	Lâmina sagital micro 08x30x0,60 mm (DS-02)	8,0	30,0	0,60
SA 200 090 022 060	Lâmina sagital micro 9x22x0,60 mm (DS-02)	9,0	22,0	0,60
SA 200 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (DS-01)	9,0	25,0	0,60
SA 200 090 027 060	Lâmina sagital micro 9x27x0,60 mm (DS-02)	9,0	27,0	0,60
SA 200 090 030 060	Lâmina sagital micro 9x30x0,60 mm (DS-02)	9,0	30,0	0,60
SA 200 090 032 060	Lâmina sagital micro 9x32x0,60 mm (DS-02)	9,0	32,0	0,60
SA 200 090 036 060	Lâmina sagital micro 9x36x0,60 mm (DS-02)	9,0	36,0	0,60
SA 200 090 039 060	Lâmina sagital micro 9x39x0,60 mm (DS-02)	9,0	39,0	0,60
SA 200 090 055 060	Lâmina recíprocante 9x55x0,60 mm (DS-03)	9,0	55,0	0,60
SA 200 090 055 090	Lâmina recíprocante 9x55x0,90 mm (DS-03)	9,0	55,0	0,90
SA 200 090 080 060	Lâmina recíprocante 9x80x0,60 mm (DS-03)	9,0	80,0	0,60
SA 200 090 080 090	Lâmina recíprocante 9x80x0,90 mm (DS-03)	9,0	80,0	0,90
SA 200 090 080 100	Lâmina recíprocante 9x80x1,00 mm (DS-03)	9,0	80,0	1,00
SA 200 090 089 100	Lâmina recíprocante 9x89x1,00 mm (DS-03)	9,0	89,0	1,00
SA 200 090 089 120	Lâmina recíprocante 9x89x1,20 mm (DS-03)	9,0	89,0	1,20
SA 200 090 089 130	Lâmina recíprocante 9x89x1,30 mm (DS-03)	9,0	89,0	1,30
SA 200 100 089 120	Lâmina recíprocante 10x89x1,20 mm (DS-03)	10,0	89,0	1,20
SA 200 100 089 130	Lâmina recíprocante 10x89x1,30 mm (DS-03)	10,0	89,0	1,30
SA 200 120 070 100	Lâmina recíprocante 12x70x1,00 mm (DS-03)	12,0	70,0	1,00
SA 200 120 082 120	Lâmina recíprocante 12x82x1,20 mm (DS-03)	12,0	82,0	1,20
SA 200 120 025 060	Lâmina micro 12x25x0,60 mm (DS-01)	12,0	25,0	0,60
SA 200 130 026 060	Lâmina micro 13x26x0,60 mm (DS-02)	13,0	26,0	0,60



SA 200 130 039 060	Lâmina micro STD 13x39x0,60 mm (DS-02)	13,0	39,0	0,60
SA 200 130 070 100	Lâmina sagital STD 13x70x1,00 mm (DS-01)	13,0	70,0	1,00
SA 200 130 070 120	Lâmina sagital STD 13x70x1,20 mm (DS-01)	13,0	70,0	1,20
SA 200 190 070 100	Lâmina sagital STD 19x70x1,00 mm (DS-01)	19,0	70,0	1,00
SA 200 190 070 120	Lâmina sagital STD 19x70x1,20 mm (DS-01)	19,0	70,0	1,20
SA 200 250 070 100	Lâmina sagital STD 25x70x1,00 mm (DS-01)	25,0	70,0	1,00
SA 200 250 070 120	Lâmina sagital STD 25x70x1,20 mm (DS-01)	25,0	70,0	1,20
SA 200 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (DS-01)	13,0	90,0	0,89
SA 200 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (DS-01)	13,0	90,0	0,90
SA 200 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,00
SA 200 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,19
SA 200 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,20
SA 200 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,27
SA 200 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,30
SA 200 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,37
SA 200 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,40
SA 200 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,47
SA 200 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (DS-01)	13,0	90,0	1,50
SA 200 150 025 060	Lâmina sagital micro 15x25x0,60 mm (DS-01)	15,0	25,0	0,60
SA 200 150 048 060	Lâmina sagital micro 15x48x0,60 mm (DS-01)	15,0	48,0	0,60
SA 200 190 039 060	Lâmina sagital micro 19x39x0,60 mm (DS-02)	19,0	39,0	0,60
SA 200 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (DS-01)	19,0	90,0	0,89
SA 200 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (DS-01)	19,0	90,0	0,90
SA 200 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,00
SA 200 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,19
SA 200 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,20
SA 200 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,27
SA 200 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,30
SA 200 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,37
SA 200 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,40
SA 200 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,47
SA 200 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (DS-01)	19,0	90,0	1,50
SA 200 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (DS-01)	19,0	100,0	0,89
SA 200 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (DS-01)	19,0	100,0	0,90
SA 200 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,00
SA 200 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,19
SA 200 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,20
SA 200 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,27
SA 200 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,30
SA 200 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,37
SA 200 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,40
SA 200 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,47
SA 200 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (DS-01)	19,0	100,0	1,50
SA 200 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (DS-01)	19,5	90,0	0,89
SA 200 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (DS-01)	19,5	90,0	0,90
SA 200 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,00
SA 200 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,19
SA 200 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,20
SA 200 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,27
SA 200 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,30

SA 200 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,37
SA 200 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,40
SA 200 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,47
SA 200 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (DS-01)	19,5	90,0	1,50
SA 200 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (DS-01)	22,0	90,0	0,89
SA 200 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (DS-01)	22,0	90,0	0,90
SA 200 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,00
SA 200 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,19
SA 200 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,20
SA 200 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,27
SA 200 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,30
SA 200 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,37
SA 200 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,40
SA 200 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,47
SA 200 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (DS-01)	22,0	90,0	1,50
SA 200 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (DS-01)	25,0	90,0	0,89
SA 200 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (DS-01)	25,0	90,0	0,90
SA 200 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,00
SA 200 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,19
SA 200 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,20
SA 200 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,27
SA 200 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,30
SA 200 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,37
SA 200 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,40
SA 200 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,47
SA 200 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (DS-01)	25,0	90,0	1,50
SA 200 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (DS-01)	25,4	90,0	0,89
SA 200 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (DS-01)	25,4	90,0	0,90
SA 200 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,00
SA 200 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,19
SA 200 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,20
SA 200 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,27
SA 200 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,30
SA 200 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,37
SA 200 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,40
SA 200 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,47
SA 200 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (DS-01)	25,4	90,0	1,50
SA 200 270 048 060	Lâmina sagital STD 27x48x0,60 mm (DS-01)	27,0	48,0	0,60
SA 200 270 068 060	Lâmina sagital STD 27x68x0,60 mm (DS-01)	27,0	68,0	0,60
SA 205 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (DS-04)	13,0	90,0	0,89
SA 205 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (DS-04)	13,0	90,0	0,90
SA 205 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (DS-04)	13,0	90,0	1,00
SA 205 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (DS-04)	13,0	90,0	1,19
SA 205 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (DS-04)	13,0	90,0	1,20
SA 205 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (DS-04)	13,0	90,0	1,27
SA 205 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (DS-04)	13,0	90,0	1,30
SA 205 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (DS-04)	13,0	90,0	1,37
SA 205 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (DS-04)	13,0	90,0	1,40
SA 205 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (DS-04)	13,0	90,0	1,47
SA 205 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (DS-04)	19,0	90,0	0,89





SA 205 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (DS-04)	19,0	90,0	0,90
SA 205 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (DS-04)	19,0	90,0	1,00
SA 205 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (DS-04)	19,0	90,0	1,19
SA 205 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (DS-04)	19,0	90,0	1,20
SA 205 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (DS-04)	19,0	90,0	1,27
SA 205 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (DS-04)	19,0	90,0	1,30
SA 205 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (DS-04)	19,0	90,0	1,37
SA 205 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (DS-04)	19,0	90,0	1,40
SA 205 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (DS-04)	19,0	90,0	1,47
SA 205 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (DS-04)	19,0	100,0	0,89
SA 205 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (DS-04)	19,0	100,0	0,90
SA 205 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (DS-04)	19,0	100,0	1,00
SA 205 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (DS-04)	19,0	100,0	1,19
SA 205 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (DS-04)	19,0	100,0	1,20
SA 205 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (DS-04)	19,0	100,0	1,27
SA 205 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (DS-04)	19,0	100,0	1,30
SA 205 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (DS-04)	19,0	100,0	1,37
SA 205 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (DS-04)	19,0	100,0	1,40
SA 205 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (DS-04)	19,0	100,0	1,47
SA 205 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (DS-04)	19,5	90,0	0,89
SA 205 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (DS-04)	19,5	90,0	0,90
SA 205 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (DS-04)	19,5	90,0	1,00
SA 205 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (DS-04)	19,5	90,0	1,19
SA 205 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (DS-04)	19,5	90,0	1,20
SA 205 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (DS-04)	19,5	90,0	1,27
SA 205 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (DS-04)	19,5	90,0	1,30
SA 205 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (DS-04)	19,5	90,0	1,37
SA 205 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (DS-04)	19,5	90,0	1,40
SA 205 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (DS-04)	19,5	90,0	1,47
SA 205 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (DS-04)	22,0	90,0	0,89
SA 205 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (DS-04)	22,0	90,0	0,90
SA 205 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (DS-04)	22,0	90,0	1,00
SA 205 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (DS-04)	22,0	90,0	1,19
SA 205 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (DS-04)	22,0	90,0	1,20
SA 205 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (DS-04)	22,0	90,0	1,27
SA 205 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (DS-04)	22,0	90,0	1,30
SA 205 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (DS-04)	22,0	90,0	1,37
SA 205 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (DS-04)	22,0	90,0	1,40
SA 205 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (DS-04)	22,0	90,0	1,47
SA 205 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (DS-04)	25,0	90,0	0,89
SA 205 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (DS-04)	25,0	90,0	0,90
SA 205 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (DS-04)	25,0	90,0	1,00
SA 205 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (DS-04)	25,0	90,0	1,19
SA 205 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (DS-04)	25,0	90,0	1,20
SA 205 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (DS-04)	25,0	90,0	1,27
SA 205 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (DS-04)	25,0	90,0	1,30
SA 205 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (DS-04)	25,0	90,0	1,37
SA 205 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (DS-04)	25,0	90,0	1,40
SA 205 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (DS-04)	25,0	90,0	1,47
SA 205 251 090 089	Lâmina sagital STD 25,1x90x0,89 mm (DS-04)	25,1	90,0	0,89

SA 205 251 090 090	Lâmina sagital STD 25,1x90x0,90 mm (DS-04)	25,1	90,0	0,90
SA 205 251 090 100	Lâmina sagital STD 25,1x90x1,00 mm (DS-04)	25,1	90,0	1,00
SA 205 251 090 119	Lâmina sagital STD 25,1x90x1,19 mm (DS-04)	25,1	90,0	1,19
SA 205 251 090 120	Lâmina sagital STD 25,1x90x1,20 mm (DS-04)	25,1	90,0	1,20
SA 205 251 090 127	Lâmina sagital STD 25,1x90x1,27 mm (DS-04)	25,1	90,0	1,27
SA 205 251 090 130	Lâmina sagital STD 25,1x90x1,30 mm (DS-04)	25,1	90,0	1,30
SA 205 251 090 137	Lâmina sagital STD 25,1x90x1,37 mm (DS-04)	25,1	90,0	1,37
SA 205 251 090 140	Lâmina sagital STD 25,1x90x1,40 mm (DS-04)	25,1	90,0	1,40
SA 205 251 090 147	Lâmina sagital STD 25,1x90x1,47 mm (DS-04)	25,1	90,0	1,47
SA 205 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (DS-04)	25,4	90,0	0,89
SA 205 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (DS-04)	25,4	90,0	0,90
SA 205 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (DS-04)	25,4	90,0	1,00
SA 205 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (DS-04)	25,4	90,0	1,19
SA 205 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (DS-04)	25,4	90,0	1,20
SA 205 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (DS-04)	25,4	90,0	1,27
SA 205 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (DS-04)	25,4	90,0	1,30
SA 205 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (DS-04)	25,4	90,0	1,37
SA 205 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (DS-04)	25,4	90,0	1,40
SA 205 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (DS-04)	25,4	90,0	1,47
SA 210 045 025 060	Lâmina sagital micro 4,5x25x0,60 mm (SN-01)	4,5	25,0	0,60
SA 210 050 026 060	Lâmina sagital micro 5,0x26x0,60 mm (SN-01)	5,0	26,0	0,60
SA 210 058 018 060	Lâmina sagital micro 5,8x18x0,60 mm (SN-01)	5,8	18,0	0,60
SA 210 058 025 060	Lâmina sagital micro 5,8x25x0,60 mm (SN-01)	5,8	25,0	0,60
SA 210 090 025 060	Lâmina sagital micro 9,0x25x0,60 mm (SN-01)	9,0	25,0	0,60
SA 210 094 025 060	Lâmina sagital micro 9,4x25x0,60 mm (SN-01)	9,4	25,0	0,60
SA 210 100 026 060	Lâmina sagital micro 10x26x0,60 mm (SN-01)	10,0	26,0	0,60
SA 210 190 025 060	Lâmina sagital micro 19x25x0,60 mm (SN-01)	19,0	25,0	0,60
SA 220 070 020 080	Lâmina sagital micro 7x20x0,80 mm (ST-01)	7,0	20,0	0,80
SA 220 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (ST-01)	7,0	25,0	0,60
SA 220 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (ST-01)	9,0	25,0	0,60
SA 220 130 060 090	Lâmina sagital STD 13x60x0,90 mm (ST-01)	13,0	60,0	0,90
SA 220 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (ST-01)	13,0	90,0	0,89
SA 220 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (ST-01)	13,0	90,0	0,90
SA 220 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,00
SA 220 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,20
SA 220 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,19
SA 220 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,27
SA 220 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,30
SA 220 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,37
SA 220 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,40
SA 220 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,47
SA 220 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (ST-01)	13,0	90,0	1,50
SA 220 140 020 060	Lâmina sagital micro 14x20x0,60 mm (ST-01)	14,0	20,0	0,60
SA 220 150 060 090	Lâmina sagital micro 15x60x0,90 mm (ST-01)	15,0	60,0	0,90
SA 220 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (ST-01)	19,0	90,0	0,89
SA 220 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (ST-01)	19,0	90,0	0,90
SA 220 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,00
SA 220 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,19
SA 220 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,20
SA 220 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,27



SA 220 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,30
SA 220 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,37
SA 220 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,40
SA 220 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,47
SA 220 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (ST-01)	19,0	90,0	1,50
SA 220 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (ST-01)	19,0	100,0	0,89
SA 220 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (ST-01)	19,0	100,0	0,90
SA 220 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,00
SA 220 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,19
SA 220 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,20
SA 220 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,27
SA 220 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,30
SA 220 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,37
SA 220 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,40
SA 220 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,47
SA 220 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (ST-01)	19,0	100,0	1,50
SA 220 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (ST-01)	19,5	90,0	0,89
SA 220 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (ST-01)	19,5	90,0	0,90
SA 220 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,00
SA 220 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,19
SA 220 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,20
SA 220 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,27
SA 220 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,30
SA 220 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,37
SA 220 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,40
SA 220 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,47
SA 220 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (ST-01)	19,5	90,0	1,50
SA 220 222 090 089	Lâmina sagital STD 22,2x90x0,89 mm (ST-01)	22,2	90,0	0,89
SA 220 222 090 090	Lâmina sagital STD 22,2x90x0,90 mm (ST-01)	22,2	90,0	0,90
SA 220 222 090 100	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,00 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,00
SA 220 222 090 119	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,19 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,19
SA 220 222 090 120	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,20 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,20
SA 220 222 090 127	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,27 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,27
SA 220 222 090 130	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,30 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,30
SA 220 222 090 137	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,37 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,37
SA 220 222 090 140	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,40 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,40
SA 220 222 090 147	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,47 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,47
SA 220 222 090 150	Lâmina sagital STD 22,2x90x1,50 mm (ST-01)	22,2	90,0	1,50
SA 220 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (ST-01)	25,0	90,0	0,89
SA 220 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (ST-01)	25,0	90,0	0,90
SA 220 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,00
SA 220 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,19
SA 220 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,20
SA 220 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,27
SA 220 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,30
SA 220 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,37
SA 220 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,40
SA 220 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,47
SA 220 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (ST-01)	25,0	90,0	1,50
SA 220 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (ST-01)	25,4	90,0	0,89



SA 220 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (ST-01)	25,4	90,0	0,90
SA 220 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,00
SA 220 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,19
SA 220 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,20
SA 220 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,27
SA 220 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,30
SA 220 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,37
SA 220 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,40
SA 220 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,47
SA 220 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (ST-01)	25,4	90,0	1,50
SA 220 270 051 060	Lâmina sagital micro 27x51x0,60 mm (ST-01)	27,0	51,0	0,60
SA 220 480 070 060	Lâmina sagital 48x70x0,60 mm (ST-01)	48,0	70,0	0,60
SA 220 490 070 090	Lâmina sagital 49x70x0,90 mm (ST-01)	49,0	70,0	0,90
SA 220 050 018 060	Lâmina sagital micro 5x18x0,60 mm (ST-02)	5,0	18,0	0,60
SA 220 060 030 060	Lâmina sagital micro 6x30x0,60 mm (ST-02)	6,0	30,0	0,60
SA 220 070 015 060	Lâmina sagital micro 7x15x0,60 mm (ST-02)	7,0	15,0	0,60
SA 220 080 022 060	Lâmina sagital micro 8x22x0,60 mm (ST-02)	8,0	22,0	0,60
SA 220 100 025 060	Lâmina sagital micro 10x25x0,60 mm (ST-02)	10,0	25,0	0,60
SA 220 100 030 060	Lâmina sagital micro 10x30x0,60 mm (ST-02)	10,0	30,0	0,60
SA 220 120 022 060	Lâmina sagital micro 12x22x0,60 mm (ST-02)	12,0	22,0	0,60
SA 220 140 025 060	Lâmina sagital micro 14x25x0,60 mm (ST-02)	14,0	25,0	0,60
SA 220 140 050 060	Lâmina sagital micro 14x50x0,60 mm (ST-02)	14,0	50,0	0,60
SA 220 145 050 060	Lâmina sagital micro 14,5x50x0,60 mm (ST-02)	14,5	50,0	0,60
SA 220 198 050 060	Lâmina sagital micro 19,8x50x0,60 mm (ST-02)	19,8	50,0	0,60
SA 220 270 048 060	Lâmina sagital micro 27x48x0,60 mm (ST-02)	27,0	48,0	0,60
SA 220 270 050 060	Lâmina sagital micro 27x50x0,60 mm (ST-02)	27,0	50,0	0,60
SA 220 120 067 090	Lâmina recíprocante 12x67x0,90 mm (ST-03)	12,0	67,0	0,90
SA 220 120 067 100	Lâmina recíprocante 12x67x1,00 mm (ST-03)	12,0	67,0	1,00
SA 220 120 067 110	Lâmina recíprocante 12x67x1,10 mm (ST-03)	12,0	67,0	1,10
SA 220 120 067 120	Lâmina recíprocante 12x67x1,20 mm (ST-03)	12,0	67,0	1,20
SA 220 125 077 090	Lâmina recíprocante 12,5x77x0,90 mm (ST-03)	12,5	77,0	0,90
SA 220 125 077 100	Lâmina recíprocante 12,5x77x1,00 mm (ST-03)	12,5	77,0	1,00
SA 220 125 077 120	Lâmina recíprocante 12,5x77x1,20 mm (ST-03)	12,5	77,0	1,20
SA 220 125 089 090	Lâmina recíprocante 12,5x89x0,90 mm (ST-03)	12,5	89,0	0,90
SA 220 125 089 100	Lâmina recíprocante 12,5x89x1,00 mm (ST-03)	12,5	89,0	1,00
SA 220 125 089 120	Lâmina recíprocante 12,5x89x1,20 mm (ST-03)	12,5	89,0	1,20
SA 220 130 068 090	Lâmina recíprocante 13x68x0,90 mm (ST-03)	13,0	68,0	0,90
SA 220 130 068 100	Lâmina recíprocante 13x68x1,00 mm (ST-03)	13,0	68,0	1,00
SA 220 130 068 120	Lâmina recíprocante 13x68x1,20 mm (ST-03)	13,0	68,0	1,20
SA 223 125 062 090	Lâmina recíprocante 12,5x62x0,90 mm (ZM-01)	12,5	62,0	0,90
SA 223 125 062 100	Lâmina recíprocante 12,5x62x1,00 mm (ZM-01)	12,5	62,0	1,00
SA 223 125 062 120	Lâmina recíprocante 12,5x62x1,20 mm (ZM-01)	12,5	62,0	1,20
SA 223 125 073 090	Lâmina recíprocante 12,5x73x0,90 mm (ZM-01)	12,5	73,0	0,90
SA 223 125 073 100	Lâmina recíprocante 12,5x73x1,00 mm (ZM-01)	12,5	73,0	1,00
SA 223 125 073 120	Lâmina recíprocante 12,5x73x1,20 mm (ZM-01)	12,5	73,0	1,20
SA 223 125 075 090	Lâmina recíprocante 12,5x75x0,90 mm (ZM-01)	12,5	75,0	0,90
SA 223 125 075 100	Lâmina recíprocante 12,5x75x1,00 mm (ZM-01)	12,5	75,0	1,00
SA 223 125 075 120	Lâmina recíprocante 12,5x75x1,20 mm (ZM-01)	12,5	75,0	1,20
SA 223 125 089 090	Lâmina recíprocante 12,5x89x0,90 mm (ZM-01)	12,5	89,0	0,90
SA 223 125 089 100	Lâmina recíprocante 12,5x89x1,00 mm (ZM-01)	12,5	89,0	1,00



SA 223 125 089 120	Lâmina recíprocante 12,5x89x1,20 mm (ZM-01)	12,5	89,0	1,20
SA 223 135 076 090	Lâmina recíprocante 13,5x76x0,90 mm (ZM-01)	13,5	76,0	0,90
SA 223 135 076 100	Lâmina recíprocante 13,5x76x1,00 mm (ZM-01)	13,5	76,0	1,00
SA 223 135 076 120	Lâmina recíprocante 13,5x76x1,20 mm (ZM-01)	13,5	76,0	1,20
SA 320 055 025 060	Lâmina sagital micro 5,5x25x0,60 mm (AE-03)	5,5	25,0	0,60
SA 320 070 035 060	Lâmina recíprocante 07x35x0,60 mm (AE-06)	7,0	35,0	0,60
SA 320 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (AE-03)	9,0	25,0	0,60
SA 320 100 035 060	Lâmina sagital micro 10x35x0,60 mm (AE-03)	10,0	35,0	0,60
SA 320 100 050 090	Lâmina sagital micro 10x50x0,60 mm (AE-03)	10,0	50,0	0,60
SA 320 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (AE-03)	13,0	90,0	0,89
SA 320 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (AE-03)	13,0	90,0	0,90
SA 320 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,00
SA 320 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,19
SA 320 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,20
SA 320 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,27
SA 320 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,30
SA 320 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,37
SA 320 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,40
SA 320 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,47
SA 320 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (AE-03)	13,0	90,0	1,50
SA 320 150 026 060	Lâmina sagital micro 15x26x0,60 mm (AE-03)	15,0	26,0	0,60
SA 320 150 045 060	Lâmina sagital micro 15x45x0,60 mm (AE-04)	15,0	45,0	0,60
SA 320 150 050 090	Lâmina sagital micro 15x50x0,90 mm (AE-03)	15,0	50,0	0,90
SA 320 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (AE-03)	19,0	90,0	0,89
SA 320 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (AE-03)	19,0	90,0	0,90
SA 320 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (AE-03)	19,0	90,0	1,00
SA 320 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (AE-03)	19,0	90,0	1,19
SA 320 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (AE-03)	19,0	90,0	1,20
SA 320 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (AE-03)	19,0	90,0	1,27
SA 320 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (AE-03)	19,0	90,0	1,30
SA 320 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (AE-03)	19,0	90,0	1,37
SA 320 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (AE-03)	19,0	90,0	1,40
SA 320 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47mm (AE-03)	19,0	90,0	1,47
SA 320 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (AE-03)	19,0	90,0	1,50
SA 320 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (AE-03)	19,0	100,0	0,89
SA 320 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (AE-03)	19,0	100,0	0,90
SA 320 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,00
SA 320 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,19
SA 320 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,20
SA 320 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,27
SA 320 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,30
SA 320 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,37
SA 320 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,40
SA 320 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,47
SA 320 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (AE-03)	19,0	100,0	1,50
SA 320 195 036 090	Lâmina sagital STD 19,5x36x0,90 mm (AE-03)	19,5	36,0	0,90
SA 320 195 065 090	Lâmina sagital STD 19,5x65x0,90 mm (AE-03)	19,5	65,0	0,90
SA 320 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (AE-03)	19,5	90,0	0,89
SA 320 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (AE-03)	19,5	90,0	0,90
SA 320 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,00





SA 320 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,19
SA 320 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,20
SA 320 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,27
SA 320 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,30
SA 320 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,37
SA 320 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,40
SA 320 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,47
SA 320 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (AE-03)	19,5	90,0	1,50
SA 320 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (AE-03)	22,0	90,0	0,89
SA 320 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (AE-03)	22,0	90,0	0,90
SA 320 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,00
SA 320 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,19
SA 320 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,20
SA 320 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,27
SA 320 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,30
SA 320 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,37
SA 320 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,40
SA 320 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,47
SA 320 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (AE-03)	22,0	90,0	1,50
SA 320 250 048 090	Lâmina sagital micro 25x48x0,90 mm (AE-03)	25,0	48,0	0,90
SA 320 250 065 090	Lâmina sagital micro 25x65x0,90 mm (AE-03)	25,0	65,0	0,90
SA 320 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (AE-03)	25,0	90,0	0,89
SA 320 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (AE-03)	25,0	90,0	0,90
SA 320 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,00
SA 320 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,19
SA 320 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,20
SA 320 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,27
SA 320 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,30
SA 320 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,37
SA 320 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,40
SA 320 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,47
SA 320 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (AE-03)	25,0	90,0	1,50
SA 320 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (AE-03)	25,4	90,0	0,89
SA 320 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (AE-03)	25,4	90,0	0,90
SA 320 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,00
SA 320 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,19
SA 320 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,20
SA 320 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,27
SA 320 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,30
SA 320 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,37
SA 320 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,40
SA 320 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,47
SA 320 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (AE-03)	25,4	90,0	1,50
SA 320 300 048 090	Lâmina sagital micro 30x48x0,90 mm (AE-03)	30,0	48,0	0,90
SA 320 320 067 090	Lâmina sagital STD 32x67x0,90 mm (AE-03)	32,0	67,0	0,90
SA 320 410 067 090	Lâmina sagital STD 41x67x0,90 mm (AE-03)	41,0	67,0	0,90
SA 320 420 050 090	Lâmina sagital 42x50x0,90 mm (AE-03)	42,0	50,0	0,90
SA 320 710 035 090	Lâmina sagital 71x35x0,90 mm (AE-03)	71,0	35,0	0,90
SA 330 095 030 060	Lâmina sagital micro 9,5x30x0,60 mm (AE-05)	9,5	30,0	0,60
SA 330 120 067 090	Lâmina sagital STD 12x67x0,90 mm (AE-05)	12,0	67,0	0,90



SA 330 130 043 060	Lâmina sagital micro 13x43x0,60 mm (AE-05)	13,0	43,0	0,60
SA 330 130 048 060	Lâmina sagital micro 13x48x0,60 mm (AE-05)	13,0	48,0	0,60
SA 330 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (AE-05)	13,0	90,0	0,89
SA 330 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (AE-05)	13,0	90,0	0,90
SA 330 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,00
SA 330 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,19
SA 330 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,20
SA 330 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,27
SA 330 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,30
SA 330 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,37
SA 330 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,40
SA 330 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,47
SA 330 130 090 150	Lâmina sagital micro 13x90x1,50 mm (AE-05)	13,0	90,0	1,50
SA 330 140 024 060	Lâmina sagital micro 14x24x0,60 mm (AE-05)	14,0	24,0	0,60
SA 330 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (AE-05)	19,0	90,0	0,89
SA 330 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (AE-05)	19,0	90,0	0,90
SA 330 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,00
SA 330 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,19
SA 330 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,20
SA 330 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,27
SA 330 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,30
SA 330 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,37
SA 330 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,40
SA 330 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,47
SA 330 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (AE-05)	19,0	90,0	1,50
SA 330 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (AE-05)	19,0	100,0	0,89
SA 330 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (AE-05)	19,0	100,0	0,90
SA 330 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,00
SA 330 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,19
SA 330 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,20
SA 330 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,27
SA 330 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,30
SA 330 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,37
SA 330 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,40
SA 330 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,47
SA 330 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (AE-05)	19,0	100,0	1,50
SA 330 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (AE-05)	19,5	90,0	0,89
SA 330 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (AE-05)	19,5	90,0	0,90
SA 330 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,00
SA 330 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,19
SA 330 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,20
SA 330 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,27
SA 330 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,30
SA 330 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,37
SA 330 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,40
SA 330 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,47
SA 330 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (AE-05)	19,5	90,0	1,50
SA 330 220 046 090	Lâmina sagital micro 22x46x0,90 mm (AE-05)	22,0	46,0	0,90
SA 330 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (AE-05)	22,0	90,0	0,89
SA 330 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (AE-05)	22,0	90,0	0,90



SA 330 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,00
SA 330 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,19
SA 330 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,20
SA 330 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,27
SA 330 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,30
SA 330 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,37
SA 330 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,40
SA 330 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,47
SA 330 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (AE-05)	22,0	90,0	1,50
SA 330 250 046 090	Lâmina sagital micro 25x46x0,90 mm (AE-05)	25,0	46,0	0,90
SA 330 250 067 090	Lâmina sagital STD 25x67x0,90 mm (AE-05)	25,0	67,0	0,90
SA 330 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (AE-05)	25,0	90,0	0,89
SA 330 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (AE-05)	25,0	90,0	0,90
SA 330 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,00
SA 330 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,19
SA 330 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,20
SA 330 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,27
SA 330 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,30
SA 330 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,37
SA 330 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,40
SA 330 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,47
SA 330 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (AE-05)	25,0	90,0	1,50
SA 330 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (AE-05)	25,4	90,0	0,89
SA 330 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (AE-05)	25,4	90,0	0,90
SA 330 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,00
SA 330 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,19
SA 330 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,20
SA 330 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,27
SA 330 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,30
SA 330 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,37
SA 330 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,40
SA 330 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,47
SA 330 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (AE-05)	25,4	90,0	1,50
SA 330 270 046 090	Lâmina sagital micro 27x46x0,90 mm (AE-05)	27,0	46,0	0,90
SA 330 270 048 090	Lâmina sagital micro 27x48x0,90 mm (AE-05)	27,0	48,0	0,90
SA 330 380 045 090	Lâmina sagital 38x45x0,90 mm (AE-05)	38,0	45,0	0,90
SA 330 500 067 060	Lâmina sagital 50x67x0,60 mm (AE-05)	50,0	67,0	0,60
SA 260 055 025 060	Lâmina sagital micro 5,5x25x0,60 mm (TA-01)	5,5	25,0	0,60
SA 260 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (TA-01)	7,0	25,0	0,60
SA 260 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (TA-01)	9,0	25,0	0,60
SA 260 090 040 060	Lâmina sagital micro 9x40x0,60 mm (TA-01)	9,0	40,0	0,60
SA 260 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (TA-01)	13,0	90,0	0,89
SA 260 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (TA-01)	13,0	90,0	0,90
SA 260 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,00
SA 260 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,19
SA 260 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,20
SA 260 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,27
SA 260 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,30
SA 260 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,37
SA 260 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,40



SA 260 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,47
SA 260 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (TA-01)	13,0	90,0	1,50
SA 260 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (TA-01)	19,0	90,0	0,89
SA 260 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (TA-01)	19,0	90,0	0,90
SA 260 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,00
SA 260 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,19
SA 260 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,20
SA 260 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,27
SA 260 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,30
SA 260 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,37
SA 260 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,40
SA 260 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,47
SA 260 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (TA-01)	19,0	90,0	1,50
SA 260 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (TA-01)	19,0	100,0	0,89
SA 260 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (TA-01)	19,0	100,0	0,90
SA 260 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,00
SA 260 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,19
SA 260 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,20
SA 260 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,27
SA 260 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,30
SA 260 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,37
SA 260 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,40
SA 260 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,47
SA 260 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (TA-01)	19,0	100,0	1,50
SA 260 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (TA-01)	19,5	90,0	0,89
SA 260 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (TA-01)	19,5	90,0	0,90
SA 260 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,00
SA 260 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,19
SA 260 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,20
SA 260 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,27
SA 260 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,30
SA 260 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,37
SA 260 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,40
SA 260 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,47
SA 260 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (TA-01)	19,5	90,0	1,50
SA 260 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (TA-01)	22,0	90,0	0,89
SA 260 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (TA-01)	22,0	90,0	0,90
SA 260 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,00
SA 260 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,19
SA 260 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,20
SA 260 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,27
SA 260 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,30
SA 260 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,37
SA 260 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,40
SA 260 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,47
SA 260 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (TA-01)	22,0	90,0	1,50
SA 260 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (TA-01)	25,0	90,0	0,89
SA 260 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (TA-01)	25,0	90,0	0,90
SA 260 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,00
SA 260 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,19

SA 260 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,20
SA 260 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,27
SA 260 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,30
SA 260 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,37
SA 260 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,40
SA 260 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,47
SA 260 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (TA-01)	25,0	90,0	1,50
SA 260 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (TA-01)	25,4	90,0	0,89
SA 260 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (TA-01)	25,4	90,0	0,90
SA 260 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,00
SA 260 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,19
SA 260 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,20
SA 260 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,27
SA 260 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,30
SA 260 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,37
SA 260 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,40
SA 260 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,47
SA 260 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (TA-01)	25,4	90,0	1,50
SA 260 280 058 060	Lâmina sagital STD 28x58x0,60 mm (TA-01)	28,0	58,0	0,60
SA 260 520 030 060	Lâmina sagital 52x30x0,60 mm (TA-01)	52,0	30,0	0,60
SA 260 520 030 090	Lâmina sagital 52x30x0,90 mm (TA-01)	52,0	30,0	0,90
SA 260 520 040 060	Lâmina sagital 52x40x0,60 mm (TA-01)	52,0	40,0	0,60
SA 260 520 040 090	Lâmina sagital 52x40x0,90 mm (TA-01)	52,0	40,0	0,90
SA 285 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (TM-01)	13,0	90,0	0,89
SA 285 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (TM-01)	13,0	90,0	0,90
SA 285 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,00
SA 285 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,19
SA 285 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,20
SA 285 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,27
SA 285 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,30
SA 285 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,37
SA 285 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,40
SA 285 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,47
SA 285 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (TM-01)	13,0	90,0	1,50
SA 285 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (TM-01)	19,0	90,0	0,89
SA 285 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (TM-01)	19,0	90,0	0,90
SA 285 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,00
SA 285 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,19
SA 285 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,20
SA 285 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,27
SA 285 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,30
SA 285 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,37
SA 285 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,40
SA 285 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,47
SA 285 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (TM-01)	19,0	90,0	1,50
SA 285 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (TM-01)	25,0	90,0	0,89
SA 285 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (TM-01)	25,0	90,0	0,90
SA 285 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,00
SA 285 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,19
SA 285 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,20





SA 285 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,27
SA 285 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,30
SA 285 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,37
SA 285 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,40
SA 285 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,47
SA 285 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (TM-01)	25,0	90,0	1,50
SA 360 055 025 060	Lâmina sagital micro 5,5x25x0,60 mm (ACF-01)	5,5	25,0	0,60
SA 360 070 025 060	Lâmina sagital micro 7x25x0,60 mm (ACF-01)	7,0	25,0	0,60
SA 360 090 025 060	Lâmina sagital micro 9x25x0,60 mm (ACF-01)	9,0	25,0	0,60
SA 360 090 040 060	Lâmina sagital micro 9x40x0,60 mm (ACF-01)	9,0	40,0	0,60
SA 360 130 064 090	Lâmina sagital STD 13x64x0,90 mm (ACF-01)	13,0	64,0	0,90
SA 360 130 090 089	Lâmina sagital S TD 13x90x0,89 mm (ACF-01)	13,0	90,0	0,89
SA 360 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (ACF-01)	13,0	90,0	0,90
SA 360 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,00
SA 360 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,19
SA 360 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,20
SA 360 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,27
SA 360 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,30
SA 360 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,37
SA 360 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,40
SA 360 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,47
SA 360 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (ACF-01)	13,0	90,0	1,50
SA 360 150 048 060	Lâmina sagital micro 15x48x0,60 mm (ACF-01)	15,0	48,0	0,60
SA 360 190 064 090	Lâmina sagital micro 19x64x0,90 mm (ACF-01)	19,0	64,0	0,90
SA 360 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (ACF-01)	19,0	90,0	0,89
SA 360 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (ACF-01)	19,0	90,0	0,90
SA 360 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,00
SA 360 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,19
SA 360 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,20
SA 360 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,27
SA 360 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,30
SA 360 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,37
SA 360 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,40
SA 360 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,47
SA 360 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (ACF-01)	19,0	90,0	1,50
SA 360 190 100 089	Lâmina sagital STD 19x100x0,89 mm (ACF-01)	19,0	100,0	0,89
SA 360 190 100 090	Lâmina sagital STD 19x100x0,90 mm (ACF-01)	19,0	100,0	0,90
SA 360 190 100 100	Lâmina sagital STD 19x100x1,00 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,00
SA 360 190 100 119	Lâmina sagital STD 19x100x1,19 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,19
SA 360 190 100 120	Lâmina sagital STD 19x100x1,20 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,20
SA 360 190 100 127	Lâmina sagital STD 19x100x1,27 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,27
SA 360 190 100 130	Lâmina sagital STD 19x100x1,30 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,30
SA 360 190 100 137	Lâmina sagital STD 19x100x1,37 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,37
SA 360 190 100 140	Lâmina sagital STD 19x100x1,40 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,40
SA 360 190 100 147	Lâmina sagital STD 19x100x1,47 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,47
SA 360 190 100 150	Lâmina sagital STD 19x100x1,50 mm (ACF-01)	19,0	100,0	1,50
SA 360 195 040 060	Lâmina sagital micro 19,5x40x0,60 mm (ACF-01)	19,5	40,0	0,60
SA 360 195 090 089	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,89 mm (ACF-01)	19,5	90,0	0,89
SA 360 195 090 090	Lâmina sagital STD 19,5x90x0,90 mm (ACF-01)	19,5	90,0	0,90
SA 360 195 090 100	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,00 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,00

SA 360 195 090 119	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,19 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,19
SA 360 195 090 120	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,20 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,20
SA 360 195 090 127	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,27 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,27
SA 360 195 090 130	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,30 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,30
SA 360 195 090 137	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,37 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,37
SA 360 195 090 140	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,40 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,40
SA 360 195 090 147	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,47 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,47
SA 360 195 090 150	Lâmina sagital STD 19,5x90x1,50 mm (ACF-01)	19,5	90,0	1,50
SA 360 220 090 089	Lâmina sagital STD 22x90x0,89 mm (ACF-01)	22,0	90,0	0,89
SA 360 220 090 090	Lâmina sagital STD 22x90x0,90 mm (ACF-01)	22,0	90,0	0,90
SA 360 220 090 100	Lâmina sagital STD 22x90x1,00 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,00
SA 360 220 090 119	Lâmina sagital STD 22x90x1,19 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,19
SA 360 220 090 120	Lâmina sagital STD 22x90x1,20 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,20
SA 360 220 090 127	Lâmina sagital STD 22x90x1,27 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,27
SA 360 220 090 130	Lâmina sagital STD 22x90x1,30 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,30
SA 360 220 090 137	Lâmina sagital STD 22x90x1,37 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,37
SA 360 220 090 140	Lâmina sagital STD 22x90x1,40 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,40
SA 360 220 090 147	Lâmina sagital STD 22x90x1,47 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,47
SA 360 220 090 150	Lâmina sagital STD 22x90x1,50 mm (ACF-01)	22,0	90,0	1,50
SA 360 250 064 090	Lâmina sagital micro 25x64x0,90 mm (ACF-01)	25,0	64,0	0,90
SA 360 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (ACF-01)	25,0	90,0	0,89
SA 360 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (ACF-01)	25,0	90,0	0,90
SA 360 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,00
SA 360 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,19
SA 360 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,20
SA 360 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,27
SA 360 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,30
SA 360 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,37
SA 360 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,40
SA 360 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,47
SA 360 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (ACF-01)	25,0	90,0	1,50
SA 360 254 090 089	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,89 mm (ACF-01)	25,4	90,0	0,89
SA 360 254 090 090	Lâmina sagital STD 25,4x90x0,90 mm (ACF-01)	25,4	90,0	0,90
SA 360 254 090 100	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,00 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,00
SA 360 254 090 119	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,19 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,19
SA 360 254 090 120	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,20 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,20
SA 360 254 090 127	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,27 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,27
SA 360 254 090 130	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,30 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,30
SA 360 254 090 137	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,37 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,37
SA 360 254 090 140	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,40 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,40
SA 360 254 090 147	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,47 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,47
SA 360 254 090 150	Lâmina sagital STD 25,4x90x1,50 mm (ACF-01)	25,4	90,0	1,50
SA 360 280 048 060	Lâmina sagital micro 28x48x0,60 mm (ACF-01)	28,0	48,0	0,60
SA 360 320 030 090	Lâmina sagital 32x30x0,90 mm (ACF-01)	32,0	30,0	0,90
SA 360 320 064 090	Lâmina sagital STD 32x64x0,90 mm (ACF-01)	32,0	64,0	0,90
SA 360 330 064 090	Lâmina sagital STD 33x64x0,90 mm (ACF-01)	33,0	64,0	0,90
SA 360 520 030 060	Lâmina sagital 52x30x0,60 mm (ACF-01)	52,0	30,0	0,60
SA 360 520 030 090	Lâmina sagital 52x30x0,90 mm (ACF-01)	52,0	30,0	0,90
SA 360 520 040 060	Lâmina sagital 52x40x0,60 mm (ACF-01)	52,0	40,0	0,60
SA 360 520 040 090	Lâmina sagital 52x40x0,90 mm (ACF-01)	52,0	40,0	0,90



SA BRZ 085 061 050	Lâmina sagital micro 8,5x61x0,50 mm (MD-01)	8,5	61,0	0,50
SA BRZ 085 061 060	Lâmina sagital micro 8,5x61x0,60 mm (MD-01)	8,5	61,0	0,60
SA BRZ 100 086 100	Lâmina sagital STD 10x86x1,00 mm (MD-01)	10,0	86,0	1,00
SA BRZ 130 090 089	Lâmina sagital STD 13x90x0,89 mm (MD-01)	13,0	90,0	0,89
SA BRZ 130 090 090	Lâmina sagital STD 13x90x0,90 mm (MD-01)	13,0	90,0	0,90
SA BRZ 130 090 100	Lâmina sagital STD 13x90x1,00 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,00
SA BRZ 130 090 119	Lâmina sagital STD 13x90x1,19 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,19
SA BRZ 130 090 120	Lâmina sagital STD 13x90x1,20 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,20
SA BRZ 130 090 127	Lâmina sagital STD 13x90x1,27 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,27
SA BRZ 130 090 130	Lâmina sagital STD 13x90x1,30 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,30
SA BRZ 130 090 137	Lâmina sagital STD 13x90x1,37 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,37
SA BRZ 130 090 140	Lâmina sagital STD 13x90x1,40 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,40
SA BRZ 130 090 147	Lâmina sagital STD 13x90x1,47 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,47
SA BRZ 130 090 150	Lâmina sagital STD 13x90x1,50 mm (MD-01)	13,0	90,0	1,50
SA BRZ 130 106 100	Lâmina sagital STD 13x126x1,00 mm (MD-01)	13,0	106,0	1,00
SA BRZ 140 071 050	Lâmina sagital micro 14x71x0,50 mm (MD-01)	14,0	71,0	0,50
SA BRZ 140 071 060	Lâmina sagital micro 14x71x0,60 mm (MD-01)	14,0	71,0	0,60
SA BRZ 190 090 089	Lâmina sagital STD 19x90x0,89 mm (MD-01)	19,0	90,0	0,89
SA BRZ 190 090 090	Lâmina sagital STD 19x90x0,90 mm (MD-01)	19,0	90,0	0,90
SA BRZ 190 090 100	Lâmina sagital STD 19x90x1,00 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,00
SA BRZ 190 090 119	Lâmina sagital STD 19x90x1,19 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,19
SA BRZ 190 090 120	Lâmina sagital STD 19x90x1,20 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,20
SA BRZ 190 090 127	Lâmina sagital STD 19x90x1,27 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,27
SA BRZ 190 090 130	Lâmina sagital STD 19x90x1,30 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,30
SA BRZ 190 090 137	Lâmina sagital STD 19x90x1,37 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,37
SA BRZ 190 090 140	Lâmina sagital STD 19x90x1,40 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,40
SA BRZ 190 090 147	Lâmina sagital STD 19x90x1,47 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,47
SA BRZ 190 090 150	Lâmina sagital STD 19x90x1,50 mm (MD-01)	19,0	90,0	1,50
SA BRZ 250 090 089	Lâmina sagital STD 25x90x0,89 mm (MD-01)	25,0	90,0	0,89
SA BRZ 250 090 090	Lâmina sagital STD 25x90x0,90 mm (MD-01)	25,0	90,0	0,90
SA BRZ 250 090 100	Lâmina sagital STD 25x90x1,00 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,00
SA BRZ 250 090 119	Lâmina sagital STD 25x90x1,19 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,19
SA BRZ 250 090 120	Lâmina sagital STD 25x90x1,20 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,20
SA BRZ 250 090 127	Lâmina sagital STD 25x90x1,27 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,27
SA BRZ 250 090 130	Lâmina sagital STD 25x90x1,30 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,30
SA BRZ 250 090 137	Lâmina sagital STD 25x90x1,37 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,37
SA BRZ 250 090 140	Lâmina sagital STD 25x90x1,40 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,40
SA BRZ 250 090 147	Lâmina sagital STD 25x90x1,47 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,47
SA BRZ 250 090 150	Lâmina sagital STD 25x90x1,50 mm (MD-01)	25,0	90,0	1,50
SA BRZ 200 096 100	Lâmina sagital STD 20x96x1,00 mm (MD-01)	20,0	96,0	1,00
SA BRZ 200 126 120	Lâmina sagital STD 20x126x1,20 mm (MD-01)	20,0	126,0	1,20
SA BRZ 250 096 100	Lâmina sagital STD 25x96x1,00 mm (MD-01)	25,0	96,0	1,00
SA BRZ 250 126 120	Lâmina sagital STD 25x126x1,20 mm (MD-01)	25,0	126,0	1,20
SA BRZ 350 069 100	Lâmina sagital 35x69x1,00 mm (MD-01)	35,0	69,0	1,00
SA BRZ 400 056 050	Lâmina sagital 40x56x0,50 mm (MD-01)	40,0	56,0	0,50
SA BRZ 400 056 060	Lâmina sagital 40x56x0,60 mm (MD-01)	40,0	56,0	0,60
SA BRZ 600 060 100	Lâmina sagital 60x60x1,00 mm (MD-01)	60,0	60,0	1,00
SA BRZ 130 050 050	Lâmina sagital micro 13x50x0,50 mm (MD-02)	13,0	50,0	0,50
SA BRZ 130 050 060	Lâmina sagital micro 13x50x0,60 mm (MD-02)	13,0	50,0	0,60
SA BRZ 190 040 050	Lâmina sagital micro 19x40x0,50 mm (MD-02)	19,0	40,0	0,50



SA BRZ 190 040 060	Lâmina sagital micro 19x40x0,60 mm (MD-02)	19,0	40,0	0,60
SA BRZ 190 050 050	Lâmina sagital micro 19x50x0,50 mm (MD-02)	19,0	50,0	0,50
SA BRZ 190 050 060	Lâmina sagital micro 19x50x0,60 mm (MD-02)	19,0	50,0	0,60
SA BRZ 280 035 050	Lâmina sagital 28x35x0,50 mm (MD-02)	28,0	35,0	0,50
SA BRZ 280 035 060	Lâmina sagital 28x35x0,60 mm (MD-02)	28,0	35,0	0,60
SA BRZ 060 010 040	Lâmina sagital micro 6x10x0,40 mm (MD-03)	6,0	10,0	0,40
SA BRZ 060 010 060	Lâmina sagital micro 6x10x0,60 mm (MD-03)	6,0	10,0	0,60
SA BRZ 060 013 040	Lâmina sagital micro 6x13x0,40 mm (MD-03)	6,0	13,0	
SA BRZ 060 013 060	Lâmina sagital micro 6x13x0,60 mm (MD-03)	6,0	13,0	0,60
SA BRZ 080 013 040	Lâmina sagital micro 8x13x0,40 mm (MD-03)	8,0	13,0	0,40
SA BRZ 080 013 060	Lâmina sagital micro 8x13x0,60 mm (MD-03)	8,0	13,0	0,60
SA BRZ 080 017 040	Lâmina sagital micro 8x17x0,40 mm (MD-03)	8,0	17,0	0,40
SA BRZ 080 017 060	Lâmina sagital micro 8x17x0,60 mm (MD-03)	8,0	17,0	0,60
SA BRZ 100 016 040	Lâmina sagital micro 10x16x0,40 mm (MD-03)	10,0	16,0	0,40
SA BRZ 100 016 060	Lâmina sagital micro 10x16x0,60 mm (MD-03)	10,0	16,0	0,60
SA BRZ 100 020 040	Lâmina sagital micro 10x20x0,40 mm (MD-03)	10,0	20,0	0,40
SA BRZ 100 020 060	Lâmina sagital micro 10x20x0,60 mm (MD-03)	10,0	20,0	0,60

#### d. Acessórios

Não se aplica.

#### e. Indicações/ Finalidade

As lâminas cirúrgicas são fabricadas em aço inoxidável (Aço inoxidável endurecido martensítico AISI 420 B / 1.4028 / X 30 Cr 13), em diversos tipos de comprimento e formatos em sua extremidade para atender a vários procedimentos cirúrgicos. Permitem uma grande variação de sentidos e amplitudes de cortes, além de permitir um ângulo de acesso variado para as diversas ações nos tecidos.

As lâminas tem finalidade auxiliar os cirurgiões durante cirurgias ortopedicas e de traumatologia, para realizar cortes, serrar, furar ou desbastar o tecido ósseo, osteocartilaginoso, e ossos grandes.

A lâmina é fornecida estéril, devendo ser observado antes da utilização se a embalagem não está violada e a data de validade.

Não deve ser utilizada em caso de estar deformada, corroída, danificada ou gasta. Fabricante recomenda uso único e descartar após o uso.

#### f. Mecanismo de Ação

O equipamento/motor ao estar em funcionamento gera um movimento oscilante em seu cabeçote, o qual é transferido para a lâmina que está encaixada adequadamente. Através dos dentes de serra na extremidade da lâmina, irá ocorrer o corte do tecido ósseo.

#### g. Modo de uso

- 1) Verifique se embalagem não está violada
- 2) Verifique o prazo de validade e indicador de esterilização
- 3) Abra o envelope cartonado no local indicado e retire o blister selado
- 4) Seguindo os procedimentos de manuseio de produtos estéreis, abra o blister, retire o protetor plástico da ponta de corte, encaixe a lâmina no equipamento/motor, de acordo com o encaixe adequado e compatível, conforme orientações do fabricante do equipamento/motor escolhido.
- 5) Verificar se a lâmina está bem encaixada e segura antes de ligar a serra
- 6) Antes de uma intervenção cirúrgica, deve ser realizada uma verificação funcional (teste de funcionamento) da peça de mão a ser conectada a lâmina cirúrgica.



As Lâminas objeto desta notificação são compatíveis com os equipamentos/motores (serras) da De Souter, Stryker, Microaire, Synthes, Linvatec, Aesculap, 3M, Tava, ACF, FRG, Bonjin, Aygün, Chinese Tools, Microdent, Star, entre outras.

Utilizar as lâminas com encaixes compatíveis aos motores/equipamentos escolhidos para realização do procedimento cirúrgico.

Durante o acoplamento das lâminas nos equipamentos/motores, deve assegurar-se que o encaixe seja feito de maneira correta e segura

#### **h. Esterilização**

Produto estéril por irradiação Gama

#### **i. Prazo de validade**

5 anos

#### **j. Efeitos Adversos**

Não se aplica.

#### **k. Contraindicação**

O cirurgião deve conhecer as condições gerais e clínicas do paciente para correta escolha dos produtos e planejamento da cirúrgica.

A utilização e manuseio devem ser realizadas por profissional da saúde capacitado, que conheça sobre o funcionamento do produto e compreenda os aspectos do método cirúrgico e limitações de uso.

#### **l. Advertências**

- O fabricante recomenda uso único. Todos os riscos de lâminas reutilizadas são de responsabilidade do operador.
- Reutilizar ou resfriar as lâminas pode afetar negativamente o equipamento utilizado e sua performance.
- Certifique-se de que a lâmina de serra esteja inserida corretamente e firmemente travada antes de ativar o equipamento/motor.
- Uma lâmina com dentes de corte dobrado ou tortos poderá oscilar e não deve ser usada.
- Não exceda os limites operacionais recomendados pelo fabricante para o equipamento.
- Monitore a temperatura da lâmina de serra periodicamente. O uso da irrigação durante a operação das lâminas ajudará a reduzir a possibilidade de necrose térmica.
- As lâminas devem poder mover-se livremente dentro do guia de corte utilizados.
- Forçar mais um lado além da oscilação pode causar a quebra da lâmina de serra.
- Óculos de proteção devem ser usados todo tempo.
- As medições na lâmina são apenas para fins informativos.
- Tenha cuidado ao manusear materiais cortantes para evitar cortes acidentais.
- Não use o produto se estiver danificado.
- O fabricante recomenda que a lâmina usada seja descartada de acordo com os regulamentos legais de resíduos médicos.

#### **m. Precauções**































Antes do uso, verifique a data de validade de esterilização e se a embalagem não está violada. Não troque as lâminas com o motor em funcionamento.

Excesso de pressão exercido pode causar ruptura, empenamento ou quebra da lâmina, ou até mesmo excesso de vibração. Isto pode causar ferimento ou lacerações no tecido do corpo.

Não utilizar as lâminas danificadas ou em mau estado de conservação ou armazenamento. Fabricante recomenda uso único



## n. Encaixes das lâminas

 ACF-01	<b>MicroAire</b>			 BJ-01	 ZM-01
 MA-01	 MA-02	 MA-03	<b>Bojin</b>		
<b>Stryker</b>			<b>Conmed Linvatec Hall</b>		
 SK-01	 SK-05	 SK-06	 LH-01	 MA-01	 MA-03
<b>De Soutter</b>				<b>Taimin</b>	<b>Smith Nephew</b>
 DS-01	 DS-02	 DS-03	 DS-04	 TM-01	 SN-01
<b>B Braun Aesculap</b>				<b>Brasseler / Tava</b>	<b>Star</b>
 AE-03	 AE-04	 AE-05	 AE-06	 TA-01	 ST-08
<b>Synthes / Zimmer</b>			<b>Microdent</b>		
 ST-01	 ST-02	 ST-03	 MD-01	 MD-02	 MD-03

## 2. DESCARTE DO PRODUTO

Produto fornecido estéril, fabricante recomenda uso único e descarte apropriado após a utilização.

Verificar a integridade da embalagem, antes do armazenamento e utilização, quanto à existência de qualquer defeito, desgaste ou violação da embalagem.

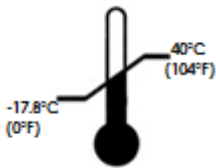
Deve ser utilizado por profissionais da saúde tecnicamente qualificados, que conheçam a sua técnica de manuseio e utilização previamente, com conhecimento sobre as instruções de uso, técnica de manuseio assépticas e o procedimento cirúrgico.

Lâminas usada, que apresentem danos ou estejam com data de validade vencidas, deverão ser inutilizadas e descaracterizadas antes do descarte. A forma indicada para descaracterização é o de impacto ou corte, de forma que seu reuso seja impossibilitado.

As lâminas podem ser descartadas conforme lixo hospitalar potencialmente contaminante ou deve ser encaminhado para uma empresa qualificada e especializada em eliminação deste tipo de resíduos.

O descarte deve obedecer as legislações ambientais estabelecidas e pela RDC 222/18 ANVISA, classificando o resíduo adequadamente.

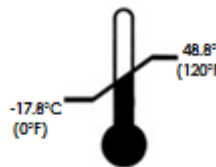
### 3. ARMAZENAMENTO

	Uso
Temperatura	
Limites de umidade relativa	0% - 91%
Limites de pressão atmosférica	86 - 106

Manter os produtos em suas embalagens originais. Proteger os produtos contra quedas e danos superficiais.

Evitar batidas e quedas sobre superfícies duras para evitar danos ao produto. Embalagens violadas ou produtos danificados não deverão ser utilizados.

### 4. TRANSPORTE

	Armazenamento e Transporte
Temperatura	
Limites de umidade relativa	0% - 91%
Limites de pressão atmosférica	86 - 106

Manter os produtos em suas embalagens originais. Proteger os produtos contra quedas e danos superficiais.

Evitar batidas e quedas sobre superfícies duras para evitar danos ao produto. Embalagens violadas ou produtos danificados não deverão ser utilizados.

### 5. NORMAS TÉCNICAS

93 / 42 / EEC: The Medical Device Directive (Council Directive 93/42/EEC of 14 June 1993)

ISO 9001: Quality Management Systems-Requirements

TS EN ISO 13485: Medical devices - Quality management systems - Requirements for regulatory purposes

TS EN ISO 14971: Medical devices - Application of risk management to medical devices

TS EN 62366-1: Medical devices - Part 1: Application of usability engineering to medical devices

ISO 10993-1: Biological evaluation of medical devices - Part 1: Evaluation and testing within a risk management process

TS EN ISO 16061: Instrumentation for use in association with non-active surgical implants - General requirements

TS EN ISO 6892-1: Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature

TS EN ISO 11607-1: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 1: Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems

TS EN ISO 11607-2: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 2: Validation requirements for forming, sealing and assembly processes

TS EN ISO 15223-1: Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements

TS EN 1041+A1: Information supplied by the manufacturer of medical devices

TS 5878: Abrasive Papers and Cloths

EN ISO 7153-1: Surgical instruments - Materials - Part 1: Metals

TS 5172 EN ISO 13402: Surgical and dental hand instruments - Determination of resistance against autoclaving corrosion and thermal exposure

TS EN ISO 9004: Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach  
TS EN 10088-1: Stainless steels - Part 1: List of stainless steels  
TS EN 10088-2: Stainless steels - Part 2: Technical delivery conditions for sheet/plate and strip of corrosion resisting steels for general purposes  
TS EN 10088-3: Stainless steels - Part 3: Technical delivery conditions for semi-finished products, bars, rods, wire, sections and bright products of corrosion resisting steels for general purposes  
TS EN ISO/IEC 17050-1: Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements  
TS EN ISO/IEC 17050-2: Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 2: Supporting documentation  
TS EN ISO 14155: Clinical investigation of medical devices for human subjects - Good clinical practice  
TS ISO 10005 Quality management systems -- Guidelines for quality plans  
MEDDEV 2.7-1 rev 4: Clinical Evaluation: A Guide for Manufacturers and Notified Bodies  
TS EN ISO/IEC 17021-1: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems -- Part 1: Requirements  
MEDDEV 2.12-1 rev 8: Guidelines on a medical devices vigilance system  
TS EN ISO 11737-1: Sterilization of health care products - Microbiological methods - Part 1: Determination of a population of microorganisms on products  
TS EN ISO 11737-2: Sterilization of medical devices - Microbiological methods - Part 2: Tests of sterility performed in the definition, validation and maintenance of a sterilization process  
TS EN ISO 11137-1: Sterilization of health care products - Radiation - Part 1: Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices  
TS EN ISO 11137-2: Sterilization of health care products - Radiation - Part 2: Establishing the sterilization dose  
TS EN ISO 14698-1: Cleanrooms and associated controlled environments - Biocontamination control - Part 1: General principles and methods  
TS EN ISO 14644-1: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration  
TS EN ISO 14644-2: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 2: Monitoring to provide evidence of cleanroom performance related to air cleanliness by particle concentration  
TS EN ISO 14644-3: Cleanrooms and associated controlled environments - Part 3: Test methods  
TS EN 868-5: Packaging for terminally sterilized medical devices - Part 5: Sealable pouches and reels of porous materials and plastic film construction - Requirements and test methods  
ASTM F88/F88M-15: Standard Test Method for Seal Strength of Flexible Barrier Materials  
ASTM F1929-15: Standard Test Method for Detecting Seal Leaks in Porous Medical Packaging by Dye Penetration  
EudraLex - Volume 4: Good Manufacturing Practice (GMP) guidelines  
FDA CGMP : Development of quality systems guidance  
IEST-RP-CC006.3: Testing Cleanrooms

## **6. ORIGEM DO PRODUTO**

### **a. Nome do fabricante:**

ACF MEDIKAL URUNLER MAKINA SAN.TIC.L TD.STI

Guzelyurt Mah. 5754 Sok. No:3/A Yunusemre, Manisa, país Turquia

### **b. Nome do detentor da notificação:**

LAS – Latim American Solutions Importação e Exportação LTDA.

CNPJ 09.183.319/0001-74

Rua Caramuru, 346– Praça da Árvore - CEP 04138-001 – São Paulo / SP - BRASIL

Fone/Fax: +55 11 3569-4106

e-mail: [qualidade@lasbrasil.com](mailto:qualidade@lasbrasil.com)